


Schiller Fred PA-1/ DefiSign LIFE elettrodi adulti

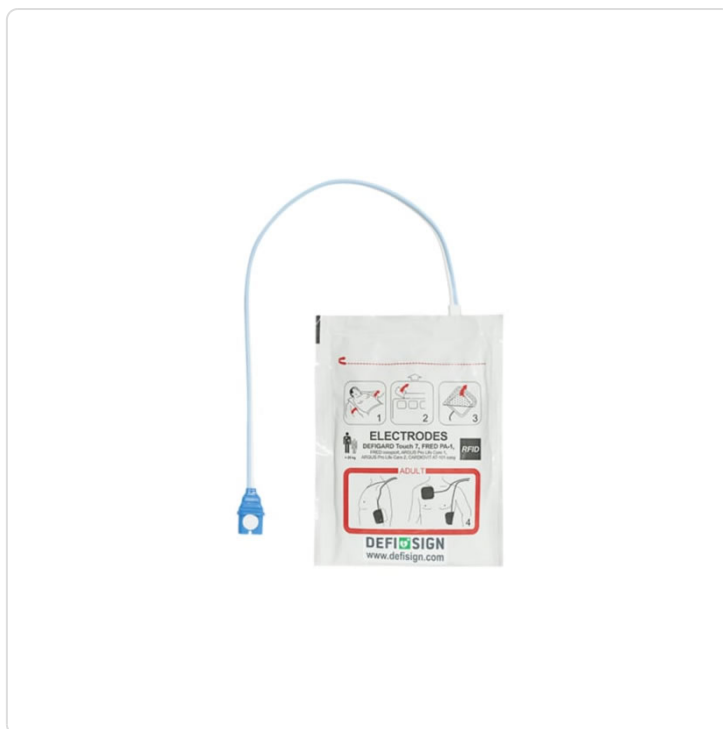

Piastre Schiller Fred PA-1/DefiSign LIFE

La coppia di elettrodi va bene per persone adulte. Le placche possono essere precollegate direttamente al defibrillatore tramite il cavo, in modo da poterle utilizzare subito al bisogno.

Vantaggi della tecnologia RFID (identificazione in radiofrequenza)

Gli elettrodi per adulti del DefiSign LIFE sono provvisti della tecnologia RFID, con cui è tenuta monitorata la scadenza degli elettrodi, quando sono connessi al defibrillatore. A due mesi dalla scadenza delle piastre, si accende la spia degli elettrodi sul defibrillatore. Così, il proprietario ha tutto il tempo per acquistare una nuova coppia.

Scadenza delle piastre del DefiSign LIFE

Tutte le piastre usate per defibrillatori semiautomatici hanno un gel conduttore che si secca dopo un determinato periodo di tempo. Quando il gel è troppo secco, non conduce più bene l'elettricità necessaria per la scossa salvavita. Per evitare conseguenze negative, tutte le piastre sul mercato hanno una data di scadenza. La durata degli elettrodi del DefiSign LIFE è di ca. 3 anni. Assicuratevi di utilizzare sempre una coppia di elettrodi sigillata e non scaduta.

Caratteristiche ed applicazione delle placche

Caratteristiche:

preconnesse

adesive

detezione pacemaker

lunghezza cavo elettrodi: 2 metri

da conservare con una temperatura di 0-50°C

Applicazione pediatrica:

Per bambini con un'età fino agli 8 anni ed un peso inferiore ai 25 kg, ci vogliono elettrodi pediatrici appositi, che si trovano qui:

Gli elettrodi vanno bene per:

DefiSign LIFE AED

Schiller Fred PA1

Schiller Fred Easyport

Argus Pro LifeCare 1

Argus Pro LifeCare 2

CARDIOVIT AT-101 Easy

Specifiche

Adatto per modello DefiSign LIFE AED, DefiSign Pocket Plus AED, Schiller FRED Easyport, Schiller FRED PA1

Durata circa. 3 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Fred PA-1/DefiSign LIFE elettrodi per adulti con RFID, con cui è tenuta monitorata la scadenza degli elettrodi, quando sono connessi al defibrillatore. A due mesi dalla scadenza delle piastre, si accende la spia degli elettrodi sul defibrillatore. Gli elettrodi hanno una durata di circa 3 anni e vanno bene per:

DefiSign LIFE AED

Schiller Fred PA1

Fred easy G2

Defigard HD 7

Defigard Touch 7

Fred Easyport, Fred Easyport plus

DefiSign Pocket Plus

Argus Pro LifeCare 1

Argus Pro LifeCare 2

CARDIOVIT AR-101 easy